

MOBITEC

Mobilität ohne Grenzen



Multifunktionsfahrzeug MTM



Mobilität ohne Grenzen

MTM Multifunktionsfahrzeug



Unser Multifunktionsfahrzeug kann auf alle Beförderungswünsche Ihrer Kunden abgestimmt werden. Es kann sowohl als Liegendtransporter mit Tragestuhl, Fahrtrage und Betreuerplatz genutzt werden, als auch als Behindertentransportwagen für bis zu 4 Rollstühle. Aufgrund des zunehmenden Kostendrucks im Gesundheitswesen stellt dieses Fahrzeug die optimale Lösung dar.

In das Fahrzeug gelangt man über eine klappbare Auffahrrampe, welche einer Belastung bis zu 500 kg stand hält. Die Fräsung in Längs- & Querrichtung gibt Fahrtrage und Rollstühlen genügend Sicherheit und Grip und das Profil nutzt sich auch nach jahrelangem Gebrauch nicht ab.

Die Fahrtrage besteht aus einer stabilen Unterkonstruktion mit großen, luftbereiften, kugelgelagerten Rädern und ist leichtgängig verschiebbar. Die Höhenverstellung erfolgt linear nach oben, so dass sie auch in kurzen Basisfahrzeugen eingesetzt werden kann. Die DIN-Trage ist abnehmbar (dynamisch getestet nach DIN EN 1789 TÜV Rheinland) mit verstellbarem Kopfteil, orangefarbener Posterauflage inklusiv Haltegurten und muldenförmigen Kopfkissen. Im Fahrzeug wird eine Schnellverriegelung für die Fahrtrage, die herausnehmbar ist, montiert. Dadurch stört sie nicht, wenn einmal kein Liegendtransport notwendig ist.


Für Begleitpersonen ist ein Einzelsitz im Fahrzeug montiert, der sowohl in Fahrtrichtung als auch gegen Fahrtrichtung befestigt werden kann. Wird er einmal nicht benötigt kann man ihn einfach aufgrund der Schnellverschlüsse herausnehmen. Um Personen das Einsteigen zu erleichtern kann an der seitlichen Schiebetür eine elektrische Trittstufe mit Haltestange montiert werden.

Im Multifunktionsfahrzeug können bis zu 4 Rollstuhlfahrer auf einmal transportiert werden, wenn die Fahrtrage, der Tragestuhl und der Einzelsitz nicht benötigt werden. Die Rollstuhlfahrer werden durch unser Rollstuhlhaltesystem gesichert, das die DIN 75078 Teil 2 erfüllt. Außerdem gibt unsere auf die Griffe des Rollstuhls aufsteckbare Universal-Kopfstütze dem Rollstuhlfahrer zusätzliche Sicherheit.

Unsere Tragestühle, die mit körpergerechter Polsterung und Kopfstütze ausgestattet sind, sind sehr bequem für den Patienten. Die optimale Sicherheit während des Tragens und im Fahrzeug ist durch den 4-Punkt-Hosenträgergurt gewährleistet. Eine erhöhte Sitzposition und ein klappbarer Fußbügel erleichtern das Setzen und Aufstehen Ihrer Patienten.

Um Ihren Kunden größtmöglichen Komfort zu bieten, können wir Ihnen weitere Optionen anbieten. So zum Beispiel eine kleine Einbauküche mit Spüle, Kühlschrank, und Kaffeemaschine, um Ihren Patienten heiße und kühle Getränke zu reichen. Für Unterhaltung nicht nur auf längeren Fahrten bieten wir Ihnen ein DVD System an, auf dem Filme oder kurze Werbespots für Ihr Unternehmen gezeigt werden können. Zu Werbezwecken dient auch der Prospekthalter, indem sie Flyer für die Patienten bereitstellen können.

Zur besseren Ausleuchtung des Fahrgastraumes können zusätzliche Strahler in der Decke montiert werden. Unser Multifunktionsfahrzeug ist nicht nur funktionell sondern auch komfortabel!

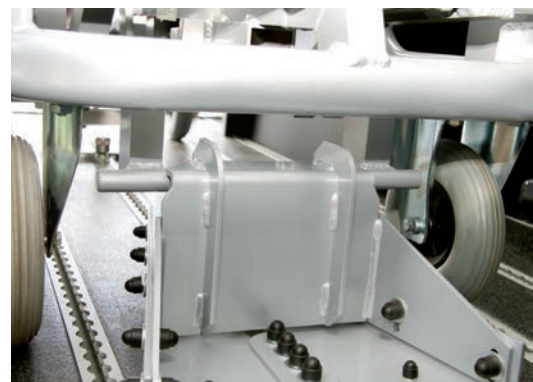

MobiTEC GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 6
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

www.mobi-tec.de