

MOBITEC

Mobilität ohne Grenzen




Sitzumbauten

Turnout

Die Schwenkplattform für alle, denen das Ein- und Aussteigen schwer fällt

Option: Fernbedienung als „Turnout E“ erhältlich

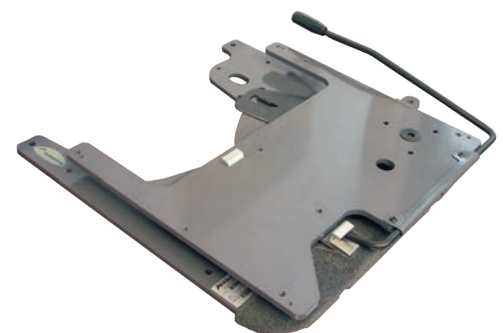


Mobilität ohne Grenzen

Mit Handbetätigung

Turnout ist eine Schwenkplattform, die es ermöglicht, den Autositz zum Ein- und Aussteigen über die Türschwelle zu drehen. Die Schwenkplattform ist auf einem verstellbaren Montagebügel befestigt, der auf den Originalfußboden des Wagens montiert wird. Auf die Schwenkplattform wird ein niedriger Autositz, wie z.B. ein König-Sitz, montiert. Der König-Sitz gewährt maximale Kopf- u. Beinfreiheit.

Turnout 2 ist für zweitürige Fahrzeuge und Turnout 4 für viertürige bestimmt.

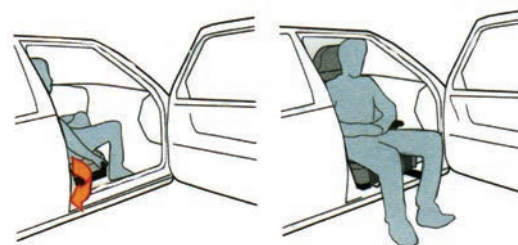

Die Original-Sicherheitsgurte, die sich im Fahrzeug befinden, werden auch weiterhin verwendet. Turnout ist mit der Kennzeichnung CE versehen, crashgetestet und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften zugelassen. Es werden nur geringfügige Veränderungen am Auto vorgenommen, die leicht behoben werden können, bevor das Fahrzeug wieder verkauft wird. Turnout kann für das nächste Fahrzeug verwendet werden.

Die Verwendung der Schwenkplattform erleichtert das tägliche Leben für einen Benutzer mit eingeschränkter Mobilität; und die Person, die ihm beim Ein- und Aussteigen hilft, vermeidet Rückenprobleme. Das Ziel war es, eine gut geformte, craschichere, leicht zu montierende und funktionale Schwenkplattform zu entwickeln. Wir meinen, dass es gelungen ist.

Modell	Turnout 2	Turnout 4	Zubehör
Höhe x Breite x Länge	38 x 450 x 480 mm	60 x 450 x 510 mm	König-Sitz Universal-Montagebügel Elektrisch betätigt (Turnout Power Kit) Schienen für König-Sitz
Sitzhöhe bei König-Sitz und Schienen, ab Türschwelle	90 mm	90 mm	
Maximale Last	250 kg	250 kg	
Gewicht	18 kg	20 kg	
Entsprechend USA-Vorschriften: VMVSS/CMVSS 207,208, 210, 302 (Turnout und BEV-Sitz) Entsprechend europäischen Vorschriften: 74/408/EEG 96/37/EEG, 93/42/EEG, ISO 3795			

Elektrische Betätigung

Turnout 2E und Turnout 4E werden mit einem einfachen Handbedienungsteil betätigt, mit dem man den Sitz auf die gewünschte Position fahren kann. Wenn das Bedienungsteil nicht gebraucht wird, kann es aufgehängt oder neben den Sitz gelegt werden.

MobiTEC GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 6
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

www.mobi-tec.de